

泰州鑫联诚润生物技术有限公司
Tai Zhou Sun Trine Biotechnology Co., Ltd

📍 泰州市医药高新区丰岸路民营工业园2、3号楼

☎ 0523-86161266

🌐 www.suntrine.com www.suntrine.net

✉ service@suntrine.com

细胞及生物药耗材

ORDERING MANUAL

泰州鑫联诚润生物技术有限公司



阿里店铺



微信公众号



WWW.SUNTRINE.COM



泰州鑫联诚润生物技术有限公司（简称鑫联诚润生物），是一家专业从事体外诊断（IVD）行业耗材的生产、制造及销售的高新技术企业。下辖佰孚生物、麦瑞杰医用包装、瞳卫士眼健康、蓝琥珀包装，企业与中科院上海药物研究所、清华大学长三角研究院建成产学研战略合作，专注IVD耗材赛道，应用领域覆盖：新药研发、生物制药、医学研究机构、疫苗研发、基因工程药物研发、细胞工程药物研发、高校生物实验室，等生命科学领域。企业生产基地坐落在江苏省泰州市高港区，毗邻中国医药城，占地达15000平米，其中十万级洁净车间面积5000平米，拥有PCR实验室、化学实验室、微生物实验室，产品已出口美国、德国、俄罗斯等32个国家。企业拥有国家高新技术认证、江苏省质量安全合格达标单位、江苏省三星上云企业、江苏省知识产权贯标单位，泰州市瞪羚企业、两化融合企业。



主营业务

细胞培养类耗材、液体处理类耗材、试剂保存耗材、样本前处理耗材、分子诊断类耗材、生物样本库耗材、核酸提取类耗材、病毒采样类耗材

100000

class clean room certification

GMP

certification

ISO13485

certification

CE/FDA

certification

专注生物耗材，护佑人类健康





目录 CONTENTS

01-03

摇瓶

04-06

方型瓶系列

07-08

细胞培养皿

09-12

细胞冻存管

13-14

血清移液管

15-26

移液吸头

28

储液瓶

29

手提桶

29

放水桶

30-32

一次性移液储液瓶

用放心耗材 选鑫联诚润

1 CHAPTER 细胞培养耗材

- 平底摇瓶
- 挡板摇瓶



平底摇瓶

Erlenmeyer Flask

SUNTRINE锥形培养瓶（简称摇瓶）是培养基配置、混合及储存的理想选择，主要用于培养对氧气要求较高的细胞，也可用于悬浮液中培养细菌、真菌、动植物细胞。



产品特点

- 由三种材质可选：PETG、PC和K胶，符合食品药品接触管理要求，避免双酚A问题；
- 产品采用独立包装，取用方便，避免交叉感染；
- 采用注拉吹一体成型技术，避免表面结痕或者细胞撞壁破裂；
- 表面光洁度达到镜面要求，通透性接近玻璃，减少了细胞贴壁的风险；
- 瓶口尺寸符合国际SBS标准，适合于生物反应器的快捷连接；
- 采用电子束灭菌，SAL=10⁻⁶，确保无DNase/RNase，无热原、无内毒素；
- 瓶盖配有0.2μm透气膜，能更好的混匀细胞与培养液，增加空气的透过率，使细胞能生长到更高的密度；
- 5L摇瓶把手设计方便拎取，避免在使用过程中因手部离瓶口太近而产生污染风险；
- 2.8L摇瓶底部优化，节约占用空间，大大提高摇床的使用率，降低客户研发生产成本；
- 瓶身采用挤吹工艺技术，瓶身光滑，降低了细胞贴壁和培养液起泡风险。

类型	平底摇瓶			挡板摇瓶
材质	PETG	PC	K胶	PC
125ml	√	√		√
250ml	√	√		√
500ml	√	√		√
1000ml	√	√		√
2800ml			√	
5000ml			√	



瓶盖带透气膜，提高气体交换效率



瓶壁通透接近玻璃，减少细胞贴壁



瓶身内外做工光滑，刻度清晰



独立包装，避免交叉感染

挡板摇瓶

Baffled Erlenmeyer Flask

挡板摇瓶是细胞生物学、微生物学和分子生物学应用的理想培养容器，挡板摇瓶配合摇床能够有效抵抗游离DNA及细胞碎片造成的黏性，增加流体剪切力，减少细胞结团，溶氧更充分，促进细胞成长。非常适合用于培养细菌、酵母、动植物细胞。

产品特点

- 挡板摇瓶瓶身材质：PC（聚碳酸酯），瓶盖材质：PP（聚丙烯）；
- 瓶盖配有0.2μm透气膜，透气不透水，使培养液中溶氧更充分；
- 采用独立包装，取用方便，避免交叉污染；
- 采用注拉吹一体成型技术，避免表面结痕或者细胞撞壁破裂；
- 表面光洁度达到镜面要求，通透性接近玻璃，减少了细胞贴壁的风险；
- 瓶口尺寸符合国际SBS标准，适合于生物反应器的快捷连接；
- 符合食品药品接触管理要求，避免双酚A问题
- 采用电子束灭菌，SAL=10⁻⁶，确保无DNase/RNase，无热原、无内毒素；



底部挡板设计增加气体交换效率



减少细胞结团、溶氧更充分





刻度清晰、透明度更高



瓶盖带透气膜，提高气体交换效率

轨道振动筛上流体的运动：

当在轨道振动筛上的锥形瓶中培养微生物时，氧气的摄入通常是细胞生长的限制因素。带有底部挡板的摇瓶会中断循环流，从而产生湍流。增加液体的气体交换表面，从而增加氧气的摄入量。

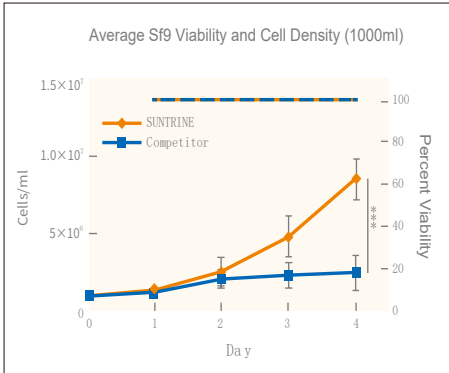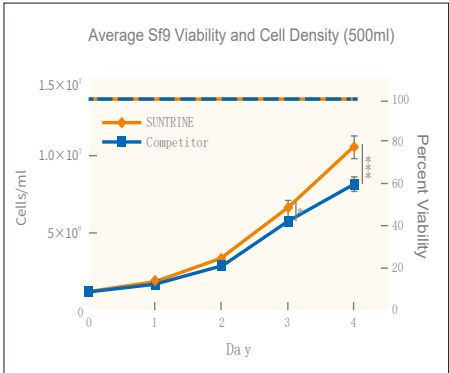

产品编号	容量 (ml)	材质	盖子类型	产品名称	高 (mm)	颈部直径 (mm)	底部直径 (mm)	包装规格	纸箱规格 (mm)	目录价
40.701131	125	PC	透气	挡板摇瓶	113.5	31.2	66	24个/箱	465×315×150	/
40.702131	250	PC	透气	挡板摇瓶	138.2	31.2	83.3	12个/箱	380×290×155	/
40.703131	500	PC	透气	挡板摇瓶	177.5	36.34	100.8	12个/箱	455×345×200	/
40.704131	1000	PC	透气	挡板摇瓶	204.3	36.34	127	6个/箱	415×275×230	/

2

CHAPTER

方型瓶系列

- 方型瓶 (PET)
- 方型瓶 (PETG)



PET方型瓶

Square media bottle (PET)



产品特点

- PET方型瓶也称方形培养基瓶
- 瓶身材质PET材质，瓶盖材质：HDPE
- 瓶身玻璃般透明，刻度精准清晰；
- 重量轻，抗裂、抗摔、抗穿刺
- 瓶身为方形，方便掌握，方便储存和运输；
- 规格有30ml、60ml、125ml、250ml、500ml、1000ml；
- 瓶口瓶盖倒角设计，经过严格的泄露测试确保不漏液；
- 无DNA/RNA酶，无热源，无内毒素，符合 USP Class VI 标准；
- 使用温度：-70℃-120℃，短期使用可耐受150℃（不建议）



PET方型瓶，主要用于培养基、血清、缓冲液、试剂的储存和运输容器、抗裂、抗穿刺，玻璃般透明，适合航空运输及平放储存。PET血清瓶可提供类似体内的细胞培养环境，有助于在大规模细胞培养应用中实现从研究到生产的顺利过渡，非常适合存放生物试剂和化学试剂，并可维持其组分的完整性和纯度。



防碎，瓶壁厚、抗压防穿刺，通透度高



采用了新型防漏设计，无衬里瓶盖，直肩半扶壁螺纹，瓶口倒角设计



PET树脂制成，最低耐受-70℃，可在较宽的温度范围内使用



瓶底上凸弯曲、便于清洗，底座稳定可靠，方形设计方便掌握



血清瓶-30ml

方型瓶-60ml

方型瓶-125ml

方型瓶-250ml

方型瓶-500ml

方型瓶-1000ml

产品编号	容量 (ml)	材质	瓶盖外径 (mm)	产品名称	灭菌方式	包装规格	纸箱规格 (mm)	目录价
40.724102	30	PET	24.3	方型瓶	辐照灭菌	5X8, 7层, 280个/箱	330×220×465	/
40.725102	60	PET	28.8	方型瓶	辐照灭菌	5X8, 5层, 200个/箱	350×235×435	/
40.720102	125	PET	42.2	方型瓶	辐照灭菌	4X6, 4层, 96个/箱	355×245×465	/
40.721102	250	PET	42.2	方型瓶	辐照灭菌	5X6, 2层, 60个/箱	395×335×335	/
40.722102	500	PET	42.2	方型瓶	辐照灭菌	4X5, 2层, 40个/箱	405×335×395	/
40.723102	1000	PET	42.2	血清瓶	辐照灭菌	3X4, 2层, 24个/箱	395×305×450	/

PETG方型瓶 PETG Square media bottle (PETG)

产品特点

- PETG方形培养基瓶/方型瓶
- 瓶身材质PETG材质，环保材质，瓶盖材质：HDPE
- 瓶身玻璃般透明，透光率达90%，瓶身刻度精准、清晰；
- 抗裂、抗摔、抗穿刺，可塑性好
- 瓶身为方形，方便掌握，方便储存和运输；
- 规格有30ml、60ml、125ml、250ml、500ml、1000ml；
- 瓶口瓶盖倒角设计，经过严格的泄露测试确保不漏液；
- 无DNA/RNA酶，无热源，无内毒素，符合 USP Class VI 标准；
- 使用温度：-60℃-75℃
- 经过辐照灭菌。



PETG方型瓶，可以用于培养基、血清、缓冲液、试剂的储存和运输容器，抗裂、抗穿刺，玻璃般透明，适合航空运输及平放储存。PETG培养基瓶可提供类似体内的细胞培养环境，有助于在大规模细胞培养应用中实现从研究到生产的顺利过渡，非常适合存放生物试剂和化学试剂，并可维持其组分的完整性和纯度。



瓶盖倒角设计，确保不漏液



培养基瓶瓶壁更厚、防穿刺、摔不烂、通透度更高，无细胞毒性



两面模制刻度，刻度精准清晰



瓶底上凸弯曲、便于清洗，底座稳定可靠，方形设计方便掌握



产品编号	容量 (ml)	材质	瓶盖外径 (mm)	产品名称	灭菌方式	包装规格	纸箱规格 (mm)	目录价
40.724111	30	PETG	24.3	方型瓶	辐照灭菌	5X8, 7层, 280个/箱	330×220×465	/
40.725111	60	PETG	28.3	方型瓶	辐照灭菌	5X8, 5层, 200个/箱	350×235×435	/
40.720111	125	PETG	42.2	方型瓶	辐照灭菌	4X6, 4层, 96个/箱	335×235×460	/
40.721111	250	PETG	42.2	方型瓶	辐照灭菌	5X6, 2层, 60个/箱	380×320×315	/
40.722111	500	PETG	42.2	方型瓶	辐照灭菌	4X5, 2层, 40个/箱	385×310×365	/
40.723111	1000	PETG	42.2	方型瓶	辐照灭菌	3X4, 2层, 24个/箱	380×290×465	/

用放心耗材 选鑫联诚润

3 CHAPTER 细菌培养耗材

• 细菌培养皿



细菌培养皿

Petri dish

介绍

- 由聚苯乙烯（PS）制成，适合实验室接种、划线、分离细菌的操作
- 产品晶莹剔透、厚度均匀，皿底平整光洁、无畸变，使定量分析更准确
- 专门设计的培养皿盖有利于气体交换
- 叠放环使叠放和处理更加容易
- 电子束灭菌



内侧凸起透气点设计，可顶住皿盖
实现培养皿内外气体交换



90*15塑料培养皿
重达14g+



易撕无菌包装 20套/袋
尺寸：510*190*8丝



光滑平整
厚度均匀，盖皿适配

产品特点



- 表面光滑平整，晶莹剔透，厚度均匀，皿底平整光洁、无畸变，使定量分析更准备。
- 堆叠设计使叠放和存储更容易
- 耐磨耐腐蚀、电子束灭菌

注意事项

本产品为一次性使用，已灭菌，不可高温高压再次灭菌，拿放时需小心谨慎，轻放轻拿，平板培养时需倒置，防止冷凝水的污染

产品编号	材质	培养面积	产品名称	规格	壁厚	包装规格	目录价
40.730101	聚苯乙烯（PS）	57.4cm²	90mm细菌培养皿	90mm*15mm	0.8mm	20套/袋，500套/箱	/

用放心耗材 选鑫联诚润

4

CHAPTER
生物样本库耗材

- 细胞冻存管
- 2D冻存管
- 2D冻存管(盒装)





细胞冻存管

Cell cryogenic vial

产品特点

- 【材质】医疗级聚丙烯材质，可反复冻融
- 【容量】0.5ml、1.5ml、2.0ml外旋、2.0ml内旋，盖子七种颜色可选：红、黄、蓝、绿、白、紫、橙
- 【包装】0.5ml、1.5ml适配100格冻存盒，2.0ml适配81格冻存盒
- 【灭菌方式】电子束灭菌，无DNase、RNase，无内毒素、无外源DNA
- 【适用温度】耐受 -196℃ ~121℃，液氮气相条件下安全存储
- 【适用范围】国家级生物样本库、第三方生物样本库、高校实验室、医院样本库、科研和检测中心生物样本库常用耗材，细胞培养实验常用耗材

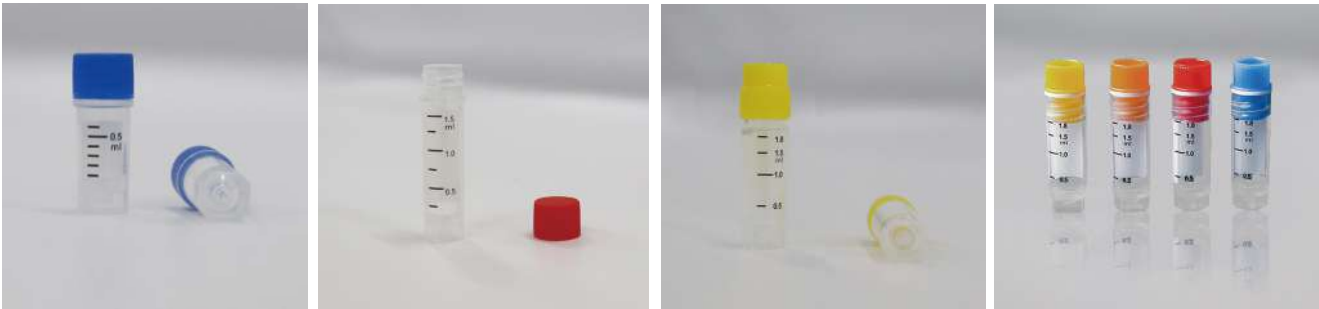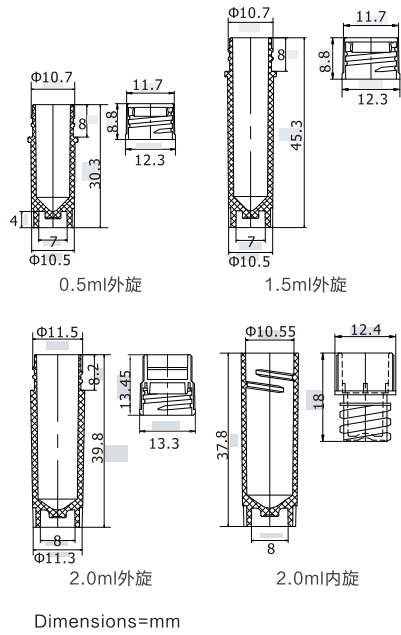


产品编号	容量	材质	产品名称	管盖颜色	管体颜色	耐受温度	包装规格	目录价
40.530111	0.5ml	聚丙烯 (PP)	外旋冷冻管	白色	透明	-196度~121度	50个/袋, 20袋/箱	/
40.530121	0.5ml	聚丙烯 (PP)	外旋冷冻管	红色	透明	-196度~121度	50个/袋, 20袋/箱	/
40.530131	0.5ml	聚丙烯 (PP)	外旋冷冻管	绿色	透明	-196度~121度	50个/袋, 20袋/箱	/
40.530141	0.5ml	聚丙烯 (PP)	外旋冷冻管	蓝色	透明	-196度~121度	50个/袋, 20袋/箱	/
40.530151	0.5ml	聚丙烯 (PP)	外旋冷冻管	黄色	透明	-196度~121度	50个/袋, 20袋/箱	/
40.530161	0.5ml	聚丙烯 (PP)	外旋冷冻管	紫色	透明	-196度~121度	50个/袋, 20袋/箱	/
40.530171	0.5ml	聚丙烯 (PP)	外旋冷冻管	橙色	透明	-196度~121度	50个/袋, 20袋/箱	/
40.531111	1.5ml	聚丙烯 (PP)	外旋冷冻管	白色	透明	-196度~121度	50个/袋, 20袋/箱	/
40.531121	1.5ml	聚丙烯 (PP)	外旋冷冻管	红色	透明	-196度~121度	50个/袋, 20袋/箱	/
40.531131	1.5ml	聚丙烯 (PP)	外旋冷冻管	绿色	透明	-196度~121度	50个/袋, 20袋/箱	/
40.531141	1.5ml	聚丙烯 (PP)	外旋冷冻管	蓝色	透明	-196度~121度	50个/袋, 20袋/箱	/
40.531151	1.5ml	聚丙烯 (PP)	外旋冷冻管	黄色	透明	-196度~121度	50个/袋, 20袋/箱	/
40.531161	1.5ml	聚丙烯 (PP)	外旋冷冻管	紫色	透明	-196度~121度	50个/袋, 20袋/箱	/
40.531171	1.5ml	聚丙烯 (PP)	外旋冷冻管	橙色	透明	-196度~121度	50个/袋, 20袋/箱	/
40.532111	2.0ml	聚丙烯 (PP)	外旋冷冻管	白色	透明	-196度~121度	50个/袋, 20袋/箱	/
40.532121	2.0ml	聚丙烯 (PP)	外旋冷冻管	红色	透明	-196度~121度	50个/袋, 20袋/箱	/
40.532131	2.0ml	聚丙烯 (PP)	外旋冷冻管	绿色	透明	-196度~121度	50个/袋, 20袋/箱	/
40.532141	2.0ml	聚丙烯 (PP)	外旋冷冻管	蓝色	透明	-196度~121度	50个/袋, 20袋/箱	/
40.532151	2.0ml	聚丙烯 (PP)	外旋冷冻管	黄色	透明	-196度~121度	50个/袋, 20袋/箱	/
40.532161	2.0ml	聚丙烯 (PP)	外旋冷冻管	紫色	透明	-196度~121度	50个/袋, 20袋/箱	/
40.532171	2.0ml	聚丙烯 (PP)	外旋冷冻管	橙色	透明	-196度~121度	50个/袋, 20袋/箱	/
40.533111	2.0ml	聚丙烯 (PP)	内旋冷冻管	白色	透明	-196度~121度	50个/袋, 20袋/箱	/
40.533121	2.0ml	聚丙烯 (PP)	内旋冷冻管	红色	透明	-196度~121度	50个/袋, 20袋/箱	/
40.533131	2.0ml	聚丙烯 (PP)	内旋冷冻管	绿色	透明	-196度~121度	50个/袋, 20袋/箱	/
40.533141	2.0ml	聚丙烯 (PP)	内旋冷冻管	蓝色	透明	-196度~121度	50个/袋, 20袋/箱	/
40.533151	2.0ml	聚丙烯 (PP)	内旋冷冻管	黄色	透明	-196度~121度	50个/袋, 20袋/箱	/
40.533161	2.0ml	聚丙烯 (PP)	内旋冷冻管	紫色	透明	-196度~121度	50个/袋, 20袋/箱	/
40.533171	2.0ml	聚丙烯 (PP)	内旋冷冻管	橙色	透明	-196度~121度	50个/袋, 20袋/箱	/

2D冻存管

2D cryogenic vial

产品特点

- 【编码信息】底部二维码、管身条形码、数字明码三码合一，每根冻存管编码信息唯一
- 【材质】医疗级聚丙烯材质，可反复冻融
- 【容量】0.5ml、1.5ml、2.0ml外旋、2.0ml内旋，盖子七种颜色可选：红、黄、蓝、绿、白、紫、橙
- 【包装】0.5ml、1.5ml适配100格冻存盒，2.0ml适配81格冻存盒
- 【灭菌方式】电子束灭菌，无DNase、RNase，无内毒素、无外源DNA
- 【适用温度】耐受 -196℃ ~121℃，液氮气相条件下安全存储
- 【适用范围】国家级生物样本库、第三方生物样本库、高校实验室、医院样本库、科研和检测中心生物样本库常用耗材，细胞培养实验常用耗材


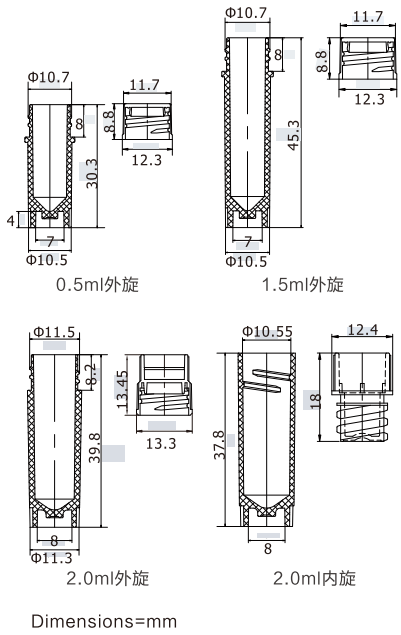


产品编号	容量	材质	产品名称	管盖颜色	管体颜色	耐受温度	包装规格	目录价
40.534111	0.5ml	聚丙烯 (PP)	2D外旋冷冻管 (三码合一)	白色	透明	-196度~121度	50支/包, 10包/盒, 2盒/箱	/
40.534121	0.5ml	聚丙烯 (PP)	2D外旋冷冻管 (三码合一)	红色	透明	-196度~121度	50支/包, 10包/盒, 2盒/箱	/
40.534131	0.5ml	聚丙烯 (PP)	2D外旋冷冻管 (三码合一)	绿色	透明	-196度~121度	50支/包, 10包/盒, 2盒/箱	/
40.534141	0.5ml	聚丙烯 (PP)	2D外旋冷冻管 (三码合一)	蓝色	透明	-196度~121度	50支/包, 10包/盒, 2盒/箱	/
40.534151	0.5ml	聚丙烯 (PP)	2D外旋冷冻管 (三码合一)	黄色	透明	-196度~121度	50支/包, 10包/盒, 2盒/箱	/
40.534161	0.5ml	聚丙烯 (PP)	2D外旋冷冻管 (三码合一)	紫色	透明	-196度~121度	50支/包, 10包/盒, 2盒/箱	/
40.534171	0.5ml	聚丙烯 (PP)	2D外旋冷冻管 (三码合一)	橙色	透明	-196度~121度	50支/包, 10包/盒, 2盒/箱	/
40.535111	1.5ml	聚丙烯 (PP)	2D外旋冷冻管 (三码合一)	白色	透明	-196度~121度	50支/包, 10包/盒, 2盒/箱	/
40.535121	1.5ml	聚丙烯 (PP)	2D外旋冷冻管 (三码合一)	红色	透明	-196度~121度	50支/包, 10包/盒, 2盒/箱	/
40.535131	1.5ml	聚丙烯 (PP)	2D外旋冷冻管 (三码合一)	绿色	透明	-196度~121度	50支/包, 10包/盒, 2盒/箱	/
40.535141	1.5ml	聚丙烯 (PP)	2D外旋冷冻管 (三码合一)	蓝色	透明	-196度~121度	50支/包, 10包/盒, 2盒/箱	/
40.535151	1.5ml	聚丙烯 (PP)	2D外旋冷冻管 (三码合一)	黄色	透明	-196度~121度	50支/包, 10包/盒, 2盒/箱	/
40.535161	1.5ml	聚丙烯 (PP)	2D外旋冷冻管 (三码合一)	紫色	透明	-196度~121度	50支/包, 10包/盒, 2盒/箱	/
40.535171	1.5ml	聚丙烯 (PP)	2D外旋冷冻管 (三码合一)	橙色	透明	-196度~121度	50支/包, 10包/盒, 2盒/箱	/
40.536111	2.0ml	聚丙烯 (PP)	2D外旋冷冻管 (三码合一)	白色	透明	-196度~121度	50支/包, 10包/盒, 2盒/箱	/
40.536121	2.0ml	聚丙烯 (PP)	2D外旋冷冻管 (三码合一)	红色	透明	-196度~121度	50支/包, 10包/盒, 2盒/箱	/
40.536131	2.0ml	聚丙烯 (PP)	2D外旋冷冻管 (三码合一)	绿色	透明	-196度~121度	50支/包, 10包/盒, 2盒/箱	/
40.536141	2.0ml	聚丙烯 (PP)	2D外旋冷冻管 (三码合一)	蓝色	透明	-196度~121度	50支/包, 10包/盒, 2盒/箱	/
40.536151	2.0ml	聚丙烯 (PP)	2D外旋冷冻管 (三码合一)	黄色	透明	-196度~121度	50支/包, 10包/盒, 2盒/箱	/
40.536161	2.0ml	聚丙烯 (PP)	2D外旋冷冻管 (三码合一)	紫色	透明	-196度~121度	50支/包, 10包/盒, 2盒/箱	/
40.536171	2.0ml	聚丙烯 (PP)	2D外旋冷冻管 (三码合一)	橙色	透明	-196度~121度	50支/包, 10包/盒, 2盒/箱	/
40.537111	2.0ml	聚丙烯 (PP)	2D内旋冷冻管 (三码合一)	白色	透明	-196度~121度	50支/包, 10包/盒, 2盒/箱	/
40.537121	2.0ml	聚丙烯 (PP)	2D内旋冷冻管 (三码合一)	红色	透明	-196度~121度	50支/包, 10包/盒, 2盒/箱	/
40.537131	2.0ml	聚丙烯 (PP)	2D内旋冷冻管 (三码合一)	绿色	透明	-196度~121度	50支/包, 10包/盒, 2盒/箱	/
40.537141	2.0ml	聚丙烯 (PP)	2D内旋冷冻管 (三码合一)	蓝色	透明	-196度~121度	50支/包, 10包/盒, 2盒/箱	/
40.537151	2.0ml	聚丙烯 (PP)	2D内旋冷冻管 (三码合一)	黄色	透明	-196度~121度	50支/包, 10包/盒, 2盒/箱	/
40.537161	2.0ml	聚丙烯 (PP)	2D内旋冷冻管 (三码合一)	紫色	透明	-196度~121度	50支/包, 10包/盒, 2盒/箱	/
40.537171	2.0ml	聚丙烯 (PP)	2D内旋冷冻管 (三码合一)	橙色	透明	-196度~121度	50支/包, 10包/盒, 2盒/箱	/

2D冻存管(盒装) 2D cryogenic vial (box-packed)

产品特点

- 【编码信息】底部二维码、管身条形码、数字明码三码合一，每根冻存管编码信息唯一
- 【材质】医疗级聚丙烯材质，可反复冻融
- 【容量】0.5ml、1.5ml、2.0ml外旋、2.0ml内旋，盖子七种颜色可选：红、黄、蓝、绿、白、紫、橙
- 【包装】0.5ml、1.5ml适配100格冻存盒，2.0ml适配81格冻存盒
- 【灭菌方式】电子束灭菌，无DNase、RNase，无内毒素、无外源DNA
- 【适用温度】耐受 -196℃ ~121℃，液氮气相条件下安全存储
- 【适用范围】国家级生物样本库、第三方生物样本库、高校实验室、医院样本库、科研和检测中心生物样本库常用耗材，细胞培养实验常用耗材

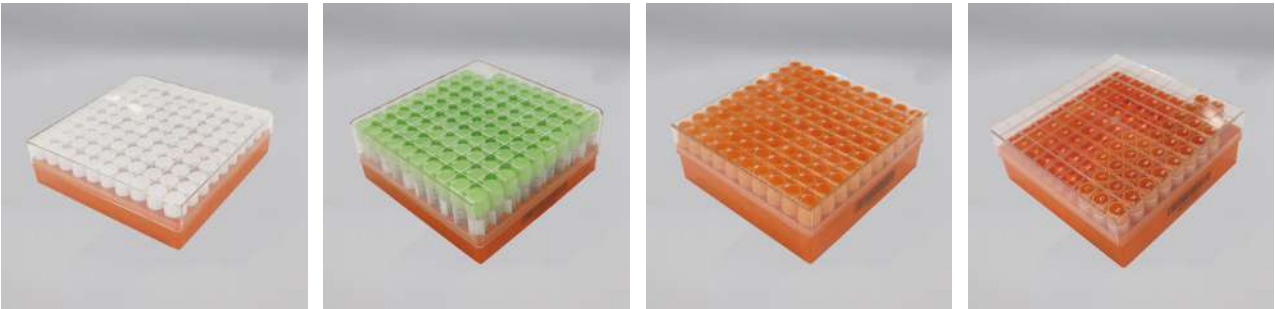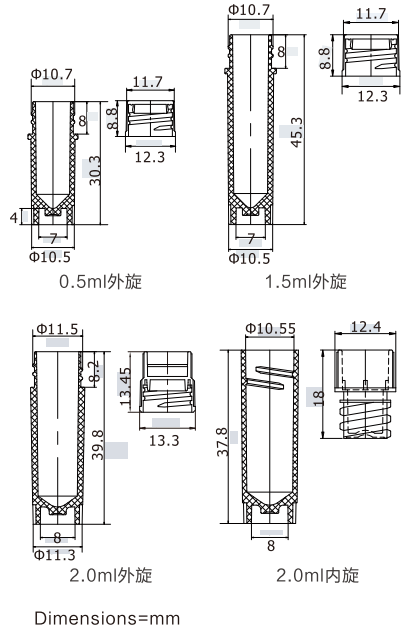

产品编号	容量	材质	产品名称	管盖颜色	管体颜色	耐受温度	包装规格	目录价
40.538111	0.5ml	聚丙烯 (PP)	2D外旋冷冻管 (三码合一)	白色	透明	-196度~121度	100支/盒, 5盒/内盒, 10盒/箱	/
40.538121	0.5ml	聚丙烯 (PP)	2D外旋冷冻管 (三码合一)	红色	透明	-196度~121度	100支/盒, 5盒/内盒, 10盒/箱	/
40.538131	0.5ml	聚丙烯 (PP)	2D外旋冷冻管 (三码合一)	绿色	透明	-196度~121度	100支/盒, 5盒/内盒, 10盒/箱	/
40.538141	0.5ml	聚丙烯 (PP)	2D外旋冷冻管 (三码合一)	蓝色	透明	-196度~121度	100支/盒, 5盒/内盒, 10盒/箱	/
40.538151	0.5ml	聚丙烯 (PP)	2D外旋冷冻管 (三码合一)	黄色	透明	-196度~121度	100支/盒, 5盒/内盒, 10盒/箱	/
40.538161	0.5ml	聚丙烯 (PP)	2D外旋冷冻管 (三码合一)	紫色	透明	-196度~121度	100支/盒, 5盒/内盒, 10盒/箱	/
40.538171	0.5ml	聚丙烯 (PP)	2D外旋冷冻管 (三码合一)	橙色	透明	-196度~121度	100支/盒, 5盒/内盒, 10盒/箱	/
40.539111	1.5ml	聚丙烯 (PP)	2D外旋冷冻管 (三码合一)	白色	透明	-196度~121度	100支/盒, 5盒/内盒, 10盒/箱	/
40.539121	1.5ml	聚丙烯 (PP)	2D外旋冷冻管 (三码合一)	红色	透明	-196度~121度	100支/盒, 5盒/内盒, 10盒/箱	/
40.539131	1.5ml	聚丙烯 (PP)	2D外旋冷冻管 (三码合一)	绿色	透明	-196度~121度	100支/盒, 5盒/内盒, 10盒/箱	/
40.539141	1.5ml	聚丙烯 (PP)	2D外旋冷冻管 (三码合一)	蓝色	透明	-196度~121度	100支/盒, 5盒/内盒, 10盒/箱	/
40.539151	1.5ml	聚丙烯 (PP)	2D外旋冷冻管 (三码合一)	黄色	透明	-196度~121度	100支/盒, 5盒/内盒, 10盒/箱	/
40.539161	1.5ml	聚丙烯 (PP)	2D外旋冷冻管 (三码合一)	紫色	透明	-196度~121度	100支/盒, 5盒/内盒, 10盒/箱	/
40.539171	1.5ml	聚丙烯 (PP)	2D外旋冷冻管 (三码合一)	橙色	透明	-196度~121度	100支/盒, 5盒/内盒, 10盒/箱	/
40.540111	2.0ml	聚丙烯 (PP)	2D外旋冷冻管 (三码合一)	白色	透明	-196度~121度	100支/盒, 5盒/内盒, 10盒/箱	/
40.540121	2.0ml	聚丙烯 (PP)	2D外旋冷冻管 (三码合一)	红色	透明	-196度~121度	100支/盒, 5盒/内盒, 10盒/箱	/
40.540131	2.0ml	聚丙烯 (PP)	2D外旋冷冻管 (三码合一)	绿色	透明	-196度~121度	100支/盒, 5盒/内盒, 10盒/箱	/
40.540141	2.0ml	聚丙烯 (PP)	2D外旋冷冻管 (三码合一)	蓝色	透明	-196度~121度	100支/盒, 5盒/内盒, 10盒/箱	/
40.540151	2.0ml	聚丙烯 (PP)	2D外旋冷冻管 (三码合一)	黄色	透明	-196度~121度	100支/盒, 5盒/内盒, 10盒/箱	/
40.540161	2.0ml	聚丙烯 (PP)	2D外旋冷冻管 (三码合一)	紫色	透明	-196度~121度	100支/盒, 5盒/内盒, 10盒/箱	/
40.540171	2.0ml	聚丙烯 (PP)	2D外旋冷冻管 (三码合一)	橙色	透明	-196度~121度	100支/盒, 5盒/内盒, 10盒/箱	/
40.541111	2.0ml	聚丙烯 (PP)	2D内旋冷冻管 (三码合一)	白色	透明	-196度~121度	100支/盒, 5盒/内盒, 10盒/箱	/
40.541121	2.0ml	聚丙烯 (PP)	2D内旋冷冻管 (三码合一)	红色	透明	-196度~121度	100支/盒, 5盒/内盒, 10盒/箱	/
40.541131	2.0ml	聚丙烯 (PP)	2D内旋冷冻管 (三码合一)	绿色	透明	-196度~121度	100支/盒, 5盒/内盒, 10盒/箱	/
40.541141	2.0ml	聚丙烯 (PP)	2D内旋冷冻管 (三码合一)	蓝色	透明	-196度~121度	100支/盒, 5盒/内盒, 10盒/箱	/
40.541151	2.0ml	聚丙烯 (PP)	2D内旋冷冻管 (三码合一)	黄色	透明	-196度~121度	100支/盒, 5盒/内盒, 10盒/箱	/
40.541161	2.0ml	聚丙烯 (PP)	2D内旋冷冻管 (三码合一)	紫色	透明	-196度~121度	100支/盒, 5盒/内盒, 10盒/箱	/
40.541171	2.0ml	聚丙烯 (PP)	2D内旋冷冻管 (三码合一)	橙色	透明	-196度~121度	100支/盒, 5盒/内盒, 10盒/箱	/

用放心耗材 选鑫联诚润

5 CHAPTER 移液耗材系列

血清移液管



血清移液器 Serological pipettes

产品特点

- SUNTRINE移液管由医用级高级聚苯乙烯制成，非常适合清晰观察并减少移液器表面的液体附着，以确保准确输送通用设计使移液管适用于大多数品牌的辅助装置。质量是通过按照ISO9001和ISO13485对生产过程的控制和管理来保证的。提供六种不同尺寸的灭菌或非灭菌：1、2、5、10、25、50ml。刻度经过校准，可精确分配至 ±2% 以内。
- 除管身有不同精度刻度标记外，用不同的颜色环标记不同的容量规格，更便于工作时的识别和使用；部分管端部带有滤芯过滤塞，能更好的防止在吸取样品时发生交叉污染。



拉伸型管和焊接型管



管内带滤芯 不同容量规格对应不同的色标



优质砂芯，防止气溶胶交叉感染



1ml 移液管




2ml 移液管



5ml 移液管



10ml 移液管

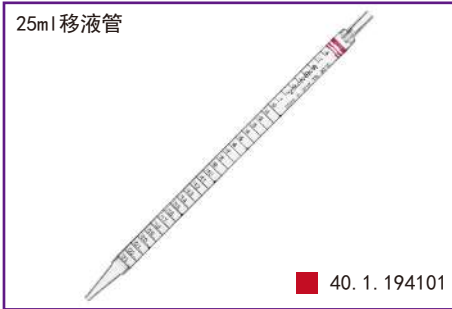

25ml 移液管



50ml 移液管

产品编号	产品名称	材质	容量	类型	色标	包装规格	箱子尺寸	目录价
40.190101	移液管	聚苯乙烯 (GPPS)	1ml	拉伸型	黄	50支/包，20包/箱	350*250*330mm	/
40.191101	移液管	聚苯乙烯 (GPPS)	2ml	拉伸型	绿	50支/包，20包/箱	350*250*330mm	/
40.192101	移液管	聚苯乙烯 (GPPS)	5ml	拉伸型	蓝	50支/包，10包/箱	400*230*360mm	/
40.193101	移液管	聚苯乙烯 (GPPS)	10ml	焊接型	桔	50支/包，10包/箱	400*230*360mm	/
40.194101	移液管	聚苯乙烯 (GPPS)	25ml	焊接型	红	25支/包，10包/箱	400*230*360mm	/
40.195101	移液管	聚苯乙烯 (GPPS)	50ml	焊接型	紫	25支/包，8包/箱	400*230*360mm	/

用放心耗材 选鑫联诚润

6 CHAPTER 移液滴定和自动化移液耗材

- 普通移液器吸头
- LTS移液器专用吸头
- 自动化吸头及导电吸头



32mm **10uL 普通吸头**



46mm **10uL 加长型吸头 (粗款)**



46mm **10uL 加长型吸头 (细款)**



流行的10ul长吸头，由于其薄而锋利的管体设计，可以到达非常特定的区域

51mm **200ul 普通型吸头，黄色**



标准的200ul；吸头。在散装规格中按200ul使用，也可在带滤芯的吸头规格中按20ul使用

51mm **200ul 透明吸头 (加粗款)**



加大的管体，即使有滤芯也可以提供200ul的容量，50ul/100ul的滤芯吸头也是使用此吸头

60mm **200ul 加长型吸头**



90mm **200ul 超长型吸头**



用于某些特定的应用

80mm **1000ul 普通吸头**



88mm **1000ul 普通吸头 (中号)**



用于某些特定的应用

102mm **1000ul 加长型吸头 (也称作：1250ul 吸头)**



长度足以提供1250ul的最大容量

移液器吸头（普通）Pipette tip (ordinary)

SUNTRINE移液吸头采用医用级聚丙烯材料，在十万级洁净车间下生产，采用精密的模具，采用专业生产工艺，确保我们的吸头拥有光滑的内表面和相同的尺寸，这无论对单道移液器和多道移液器的精确移液都至关重要，生产符合ISO9001:2002质量管理体系，每一批产品都经过检查以确保产品无DNA酶、无RNA酶、无热源。规格有10ul、20ul、50ul、100ul、200ul、300ul、1000ul，普通无滤芯吸头、带滤芯吸头、加长版吸头、低吸附吸头。

10uL 普通吸头，带刻度，透明



200uL 普通吸头，黄色



200uL 吸头 (加粗款)，带刻度，透明



1000uL 普通款，蓝色



产品编码	产品参数	装箱规格
40.102102	10ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,盒装，灭菌	96支/盒，50盒/箱
40.108102	20ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,盒装，灭菌	96支/盒，50盒/箱
40.112102	50ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,盒装，灭菌	96支/盒，50盒/箱
40.110002	100ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,盒装，灭菌	96支/盒，50盒/箱
40.104102	200ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,盒装，灭菌	96支/盒，50盒/箱
40.106102	1000ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,盒装，灭菌	96支/盒，50盒/箱
40.101102	10ul吸头-不带滤芯,无 DNase/RNase ,盒装，灭菌	96支/盒，50盒/箱
40.109102	100ul吸头-不带滤芯,无 DNase/RNase ,盒装，灭菌	96支/盒，50盒/箱
40.103102	200ul吸头-不带滤芯,无 DNase/RNase ,盒装，灭菌	96支/盒，50盒/箱
40.113102	300ul吸头-不带滤芯,无 DNase/RNase ,盒装，灭菌	96支/盒，50盒/箱
40.105102	1000ul吸头-不带滤芯,无 DNase/RNase ,盒装，灭菌	96支/盒，50盒/箱
40.102101	10ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,袋装，灭菌	1000/袋，40袋/箱
40.108101	20ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,袋装，灭菌	1000/袋，20袋/箱
40.112101	50ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,袋装，灭菌	1000/袋，20袋/箱
40.110101	100ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,袋装，灭菌	1000/袋，20袋/箱
40.104101	200ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,袋装，灭菌	1000/袋，20袋/箱
40.106101	1000ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,袋装，灭菌	1000/袋，10袋/箱
40.101101	10ul吸头-不带滤芯,无 DNase/RNase ,袋装，灭菌	1000/袋，40袋/箱
40.109101	100ul吸头-不带滤芯,无 DNase/RNase ,袋装，灭菌	1000/袋，20袋/箱
40.103101	200ul吸头-不带滤芯,无 DNase/RNase ,袋装，灭菌	1000/袋，20袋/箱
40.113101	300ul吸头-不带滤芯,无 DNase/RNase ,袋装，灭菌	1000/袋，20袋/箱
40.105101	1000ul吸头-不带滤芯,无 DNase/RNase ,袋装，灭菌	1000/袋，10袋/箱



移液器吸头（加长）Pipette tip（lengthen）

10uL 加长型吸头（粗款），带刻度，透明，45mm 10uL 加长型吸头（细款），带刻度，透明



200uL 加长吸头（也称作300ul 吸头），带刻度，透明，60mm



1000uL 加长款（也称 1250ul ），带刻度，蓝色，102mm



产品编码		产品参数	装箱规格
40.102132		10ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,加长（46mm），盒装，灭菌	96支/盒，50盒/箱
40.102113		*10ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,加长,盒装，灭菌透明	96支/盒，50盒/箱
40.108122		20ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,加长，盒装，灭菌	96支/盒，50盒/箱
40.110022		100ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,加长，盒装，灭菌	96支/盒，50盒/箱
40.104132		200ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,加长（60mm），盒装，灭菌	96支/盒，50盒/箱
40.104113		*200ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,加长,盒装，灭菌 淡黄色	96支/盒，50盒/箱
40.106122		1000ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,加长，盒装，灭菌	96支/盒，50盒/箱
40.106113		*1000ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,加长,盒装，灭菌 淡蓝色	96支/盒，50盒/箱
40.101122		10ul吸头-不带滤芯,无 DNase/RNase ,加长（46mm），盒装，灭菌	96支/盒，50盒/箱
40.102123		*10ul吸头-无滤芯,无 DNase/RNase ,加长,盒装，灭菌,透明，	96支/盒，50盒/箱
40.109122		100ul吸头-不带滤芯,无 DNase/RNase ,加长，盒装，灭菌	96支/盒，50盒/箱
40.103122		200ul吸头-不带滤芯,无 DNase/RNase ,加长，盒装，灭菌	96支/盒，50盒/箱
40.104123		*200ul吸头-无滤芯,无 DNase/RNase ,加长,盒装，灭菌 淡黄色	96支/盒，50盒/箱
40.105122		1000ul吸头-不带滤芯,无 DNase/RNase ,加长，盒装，灭菌	96支/盒，50盒/箱
40.106123		*1000ul吸头-无滤芯,无 DNase/RNase ,加长,盒装，灭菌 淡蓝色	96支/盒，50盒/箱
40.102111		10ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,加长（46mm），袋装，灭菌	1000/袋，40袋/箱
40.102151		*10ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,加长,袋装，灭菌 透明	4000/袋，10袋/箱
40.108111		20ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,加长，袋装，灭菌	1000/袋，20袋/箱
40.110111		100ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,加长，袋装，灭菌	1000/袋，20袋/箱
40.104111		200ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,加长，袋装，灭菌	1000/袋，20袋/箱
40.104151		*200ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,加长,袋装，灭菌 淡黄色	2000/袋，10袋/箱
40.106111		1000ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,加长，袋装，灭菌	1000/袋，10袋/箱
40.106151		*1000ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,加长,袋装，灭菌 淡蓝色	500/袋，10袋/箱
40.101111		10ul吸头-不带滤芯,无 DNase/RNase ,加长（46mm），袋装，灭菌	1000/袋，40袋/箱
40.102021		*10ul吸头-无滤芯,无 DNase/RNase ,加长,袋装，非灭菌 透明	4000/袋，10袋/箱
40.109111		100ul吸头-不带滤芯,无 DNase/RNase ,加长，袋装，灭菌	1000/袋，20袋/箱
40.103111		200ul吸头-不带滤芯,无 DNase/RNase ,加长，袋装，灭菌	1000/袋，20袋/箱
40.104021		*200ul吸头-无滤芯,无 DNase/RNase ,加长,袋装，非灭菌 淡黄色，	2000/袋，10袋/箱
40.105111		1000ul吸头-不带滤芯,无 DNase/RNase ,加长(102mm)，袋装，灭菌	1000/袋，10袋/箱
40.106021		*1000ul吸头-无滤芯,无 DNase/RNase ,加长,袋装，非灭菌 淡蓝色，	500支/袋，10袋/箱

移液器吸头（低吸附）Pipette tip（Low adsorption）

10uL 低吸附，带刻度，透明



200uL 透明吸头（加粗款）低吸附，带刻度，透明



200uL 普通，低吸附，透明



1000uL 普通，低吸附，透明



产品编码		产品参数	装箱规格
40.102112		10ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,低吸附，盒装，灭菌	96支/盒，50盒/箱
40.108012		20ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,低吸附，盒装，灭菌	96支/盒，50盒/箱
40.110012		100ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,低吸附，盒装，灭菌	96支/盒，50盒/箱
40.104112		200ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,低吸附，盒装，灭菌	96支/盒，50盒/箱
40.106112		1000ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,低吸附，盒装，灭菌	96支/盒，50盒/箱
40.101112		10ul吸头-不带滤芯,无 DNase/RNase ,低吸附，盒装，灭菌	96支/盒，50盒/箱
40.109112		100ul吸头-不带滤芯,无 DNase/RNase ,低吸附，盒装，灭菌	96支/盒，50盒/箱
40.103112		200ul吸头-不带滤芯,无 DNase/RNase ,低吸附，盒装，灭菌	96支/盒，50盒/箱
40.113112		300ul吸头-不带滤芯,无 DNase/RNase ,低吸附，盒装，灭菌	96支/盒，50盒/箱
40.105112		1000ul吸头-不带滤芯,无 DNase/RNase ,低吸附，盒装，灭菌	96支/盒，50盒/箱
40.102121		10ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,低吸附，袋装，灭菌	1000/袋，40袋/箱
40.108121		20ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,低吸附，袋装，灭菌	1000/袋，20袋/箱
40.112121		50ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,低吸附，袋装，灭菌	1000/袋，20袋/箱
40.110121		100ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,低吸附，袋装，灭菌	1000/袋，20袋/箱
40.104121		200ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,低吸附，袋装，灭菌	1000/袋，20袋/箱
40.106121		1000ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,低吸附，袋装，灭菌	1000/袋，10袋/箱
40.101121		10ul吸头-不带滤芯,无 DNase/RNase ,低吸附，袋装，灭菌	1000/袋，40袋/箱
40.109121		100ul吸头-不带滤芯,无 DNase/RNase ,低吸附，袋装，灭菌	1000/袋，20袋/箱
40.103121		200ul吸头-不带滤芯,无 DNase/RNase ,低吸附，袋装，灭菌	1000/袋，20袋/箱
40.113121		300ul吸头-不带滤芯,无 DNase/RNase ,低吸附，袋装，灭菌	1000/袋，20袋/箱
40.105121		1000ul吸头-不带滤芯,无 DNase/RNase ,低吸附，袋装，灭菌	1000/袋，10袋/箱

移液器吸头（加长低吸附）

Pipette tip（lengthen Low adsorption）

10uL 加长款（粗款）低吸附，带刻度，透明，46mm



10uL 加长款（细款）低吸附，带刻度，透明，46mm



200uL 加长款（也称作 300ul），低吸附，带刻度，透明，60mm



1000uL 加长款（也称作1250ul）低吸附，带刻度，透明，102mm



产品编码	产品参数	装箱规格
40.102122	10ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,低吸附，加长（46mm），盒装，灭菌	96支/盒，50盒/箱
40.104122	20ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,低吸附，加长，盒装，灭菌	96支/盒，50盒/箱
40.110032	100ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,低吸附，加长，盒装，灭菌	96支/盒，50盒/箱
40.108132	200ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,低吸附，加长（60mm），盒装，灭菌	96支/盒，50盒/箱
40.106132	1000ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,低吸附，加长，盒装，灭菌	96支/盒，50盒/箱
40.101132	10ul吸头-不带滤芯,无 DNase/RNase ,低吸附，加长（46mm），盒装，灭菌	96支/盒，50盒/箱
40.109132	100ul吸头-不带滤芯,无 DNase/RNase ,低吸附，加长，盒装，灭菌	96支/盒，50盒/箱
40.103132	200ul吸头-不带滤芯,无 DNase/RNase ,低吸附，加长（60mm），盒装，灭菌	96支/盒，50盒/箱
40.105132	1000ul吸头-不带滤芯,无 DNase/RNase ,低吸附，加长(102mm)，盒装，灭菌	96支/盒，50盒/箱
40.102131	10ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,低吸附，加长（46mm），袋装，灭菌	1000/袋，40袋/箱
40.108131	20ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,低吸附，加长，袋装，灭菌	1000/袋，20袋/箱
40.110131	100ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,低吸附，加长，袋装，灭菌	1000/袋，20袋/箱
40.104131	200ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,低吸附，加长，袋装，灭菌	1000/袋，20袋/箱
40.106131	1000ul吸头-带滤芯,无 DNase/RNase ,低吸附，加长，袋装，灭菌	1000/袋，10袋/箱
40.101131	10ul吸头-不带滤芯,无 DNase/RNase ,低吸附，加长（46mm），袋装，灭菌	1000/袋，40袋/箱
40.109131	100ul吸头-不带滤芯,无 DNase/RNase ,低吸附，加长，袋装，灭菌	1000/袋，20袋/箱
40.103131	200ul吸头-不带滤芯,无 DNase/RNase ,低吸附，加长，袋装，灭菌	1000/袋，20袋/箱
40.105131	1000ul吸头-不带滤芯,无 DNase/RNase ,低吸附，加长(102mm)，袋装，灭菌	1000/袋，10袋/箱



吸头适配表

Adaptation table

BIOHIT		PIPETTE TIPS												FILTER TIPS											
PIPETTE BRAND	PRODUCT NO.	40.101101	40.102101	40.102102	40.103101	40.103102	40.104111	40.104132	40.105101	40.105102	40.106111	40.105122	40.102102	40.101101	40.108102	40.108101	40.104132	40.104111	40.106102	40.106101	40.106122	40.106111			
PIPETTE VOLUME		0.1-10UL	0.1-10UL	0.1-10UL	1-200ul	1-200ul	1-300ul	1-300ul	100-1000ul	100-1000ul	100-1000ul	100-1000ul	0.1-10UL	0.1-10UL	1-20UL	1-20UL	1-300ul	1-300ul	100-1000ul	100-1000ul	100-1000ul	100-1000ul			
BIOHIT PROLINE	0.1-2.5ul	√		√									√	√											
	0.5-10ul	√		√									√	√											
	2-20ul				√	√									√	√									
	5-50ul																								
	10-100ul																								
	20-200ul						√	√									√	√							
	50-300ul						√	√									√	√							
	100-1000ul								√	√	√	√							√	√	√	√			
BIOHIT PROLINE (plus)	0.1-3ul	√		√									√	√											
	0.5-10ul	√		√									√	√											
	2-20ul				√	√									√	√									
	5-50ul																								
	10-100ul																								
	20-200ul						√	√									√	√							
	30-300ul						√	√									√	√							
	100-1000ul								√	√	√	√							√	√	√	√			
BRAND																									
BRAND	0.1-1ul	√	√	√									√	√											
	0.1-2.5ul	√	√	√									√	√											
	0.5-10ul	√	√	√									√	√											
	2-20ul				√	√									√	√									
	5-50ul				√	√									√	√									
	10-100ul				√	√									√	√									
	20-200ul				√	√	√	√							√	√	√	√							
	30-300ul				√	√	√	√							√	√	√	√							
	100-1000ul								√	√	√	√							√	√	√	√			

吸头适配表

Adaptation table

EPPENDORF		PIPETTE TIPS												FILTER TIPS											
PIPETTE BRAND	PRODUCT NO.	40.101101	40.102101	40.102102	40.103101	40.103102	40.104111	40.104132	40.105101	40.105102	40.106111	40.105122	40.102102	40.101101	40.108102	40.108101	40.104132	40.104111	40.106102	40.106101	40.106122	40.106111			
PIPETTE VOLUME		0.1-10UL	0.1-10UL	0.1-10UL	1-200ul	1-200ul	1-300ul	1-300ul	100-1000ul	100-1000ul	100-1000ul	100-1000ul	0.1-10UL	0.1-10UL	1-20UL	1-20UL	1-300ul	1-300ul	100-1000ul	100-1000ul	100-1000ul	100-1000ul			
	0.1-2.5ul	√	√	√									√	√											
	0.5-10ul	√	√	√									√	√											
	2-20ul				√	√									√	√									
	10-100ul				√	√	√	√							√	√	√	√							
	20-200ul				√	√	√	√							√	√	√	√							
	120-1200ul										√	√									√	√			
GILSON																									
GILSON PIPETMAN (PG)	0.2-2ul	√	√	√									√	√											
	1-10ul	√	√	√									√	√											
	2-20ul				√	√									√	√									
	10-100ul				√	√											√	√							
	20-200ul				√	√	√	√									√	√	√	√					
	100-1000ul								√	√	√	√									√	√			
GILSON PIPETMAN (PN)	0.2-2ul	√	√	√									√	√											
	1-10ul	√	√	√									√	√											
	2-20ul				√	√									√	√									
	10-100ul				√	√											√	√							
	20-200ul				√	√	√	√									√	√	√	√					
	100-1000ul								√	√	√	√									√	√			
GILSON PIPETMAN (PL)	0.2-2ul	√	√	√									√	√											
	1-10ul	√	√	√									√	√											
	2-20ul				√	√									√	√									
	10-100ul				√	√											√	√							
	20-200ul				√	√	√	√									√	√	√	√					
	100-1000ul								√	√	√	√									√	√			

吸头适配表

Adaptation table

THERMO		PIPETTE TIPS												FILTER TIPS									
PIPETTE BRAND	PRODUCT NO.	40.101101	40.102101	40.102102	40.103101	40.103102	40.104111	40.104132	40.105101	40.105102	40.106111	40.105122	40.102102	40.101101	40.108102	40.108101	40.104132	40.104111	40.106102	40.106101	40.106122	40.106111	
PIPETTE VOLUME		0.1-10UL	0.1-10UL	0.1-10UL	1-200ul	1-200ul	1-300ul	1-300ul	100-1000ul	100-1000ul	100-1000ul	100-1000ul	0.1-10UL	0.1-10UL	1-20UL	1-20UL	1-300ul	1-300ul	100-1000ul	100-1000ul	100-1000ul	100-1000ul	
Thermo Finnpiptette (F1)	0.2-2ul	√	√	√									√	√									
	1-10ul	√	√	√									√	√									
	1-10ul (μTip)																						
	2-20ul				√	√									√	√							
	2-20ul (μTip)																						
	5-50ul																						
	5-50ul (μTip)																						
	10-100ul				√	√																	
	20-200ul				√	√	√	√									√	√					
	30-300ul				√	√	√	√									√	√					
	100-1000ul										√	√								√	√		
Thermo Finnpiptette (F2)	0.2-2ul (μTip)																						
	1-10ul	√	√	√									√										
	1-10ul (μTip)																						
	2-20ul				√	√									√	√							
	2-20ul (μTip)																						
	5-50ul																						
	5-50ul (μTip)																						
	10-100ul				√	√																	
	20-200ul				√	√	√	√									√	√					
	100-1000ul										√	√								√	√		
Thermo Finnpiptette (F3)	0.2-2ul	√	√	√									√										
	1-10ul	√	√	√									√										
	1-10ul (μTip)																						
	2-20ul				√	√									√	√							
	2-20ul (μTip)																						
	5-50ul																						
	5-50ul (μTip)																						
	10-100ul				√	√																	
	20-200ul				√	√	√	√									√	√					
	100-1000ul										√	√										√	

LTS移液器专用吸头 Pipette tip(LTS)

产品特点

适配LTS移液器吸头由纯聚丙烯制成，完全不含生物活性成分，在十万级洁净车间下生产，已消除外部污染物（DNA、DNase、RNase、ATP、热源、PCR抑制剂、蛋白质或蛋白酶）的可能性，高品质LTS吸头保证完全惰性且无污染，所以他们不会以任何方式影响实验结果。


20ul 适配LTS移液器系列吸头



200ul 适配LTS移液器系列吸头



1000ul 适配LTS移液器系列吸头

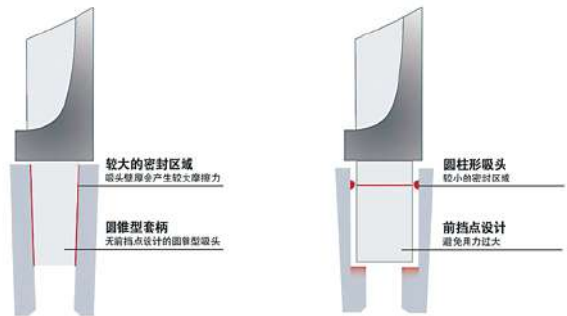

传统移液系统 较高操作力

LTS移液系统使用户无需过度用力即可实现可靠及一致的匹配效果(移液器与移液吸头之间)。LTS薄壁吸头具有设计精良的校小接触区域与 前挡点设计，前挡点设计让您确认匹配的确切位置，从而不必太深插入成者过度用力

产品编号	容量	材质	产品名称	灭菌方式	包装规格	目录价
40.107100-02RT	20ul	聚丙烯 (PP)	适配LTS移液器吸头，盒装，灭菌	辐照灭菌	96个/盒.50盒/箱	/
40.107101-02RT	20ul	聚丙烯 (PP)	适配LTS移液器吸头，盒装，灭菌，低吸附	辐照灭菌	96个/盒.50盒/箱	/
40.108100-02RT	20ul	聚丙烯 (PP)	适配LTS移液器吸头，盒装，带滤芯，灭菌	辐照灭菌	96个/盒.50盒/箱	/
40.108101-02RT	20ul	聚丙烯 (PP)	适配LTS移液器吸头，盒装，带滤芯，灭菌，低吸附	辐照灭菌	96个/盒.50盒/箱	/
40.107000-02RT	20ul	聚丙烯 (PP)	适配LTS移液器吸头，袋装	辐照灭菌	1000支/袋，40袋/箱	/
40.107001-02RT	20ul	聚丙烯 (PP)	适配LTS移液器吸头，袋装，低吸附	辐照灭菌	1000支/袋，40袋/箱	/
40.107102-02RT	20ul	聚丙烯 (PP)	适配LTS移液器吸头，叠装，灭菌	辐照灭菌	1000支/袋，40袋/箱	/
40.107103-02RT	20ul	聚丙烯 (PP)	适配LTS移液器吸头，叠装，灭菌，低吸附	辐照灭菌	1000支/袋，40袋/箱	/
40.103100-02RT	200ul	聚丙烯 (PP)	适配LTS移液器吸头，盒装，灭菌	辐照灭菌	96个/盒.50盒/箱	/
40.103101-02RT	200ul	聚丙烯 (PP)	适配LTS移液器吸头，盒装，灭菌，低吸附	辐照灭菌	96个/盒.50盒/箱	/
40.104100-02RT	200ul	聚丙烯 (PP)	适配LTS移液器吸头，盒装，带滤芯，灭菌	辐照灭菌	96个/盒.50盒/箱	/
40.104101-02RT	200ul	聚丙烯 (PP)	适配LTS移液器吸头，盒装，带滤芯，灭菌，低吸附	辐照灭菌	96个/盒.50盒/箱	/
40.103000-02RT	200ul	聚丙烯 (PP)	适配LTS移液器吸头，袋装	辐照灭菌	1000支/袋，40袋/箱	/
40.103001-02RT	200ul	聚丙烯 (PP)	适配LTS移液器吸头，袋装，低吸附	辐照灭菌	1000支/袋，40袋/箱	/
40.103102-02RT	200ul	聚丙烯 (PP)	适配LTS移液器吸头，叠装，灭菌	辐照灭菌	96支/盒，10盒/叠，10叠/箱	/
40.103103-02RT	200ul	聚丙烯 (PP)	适配LTS移液器吸头，叠装，灭菌，低吸附	辐照灭菌	96支/盒，10盒/叠，10叠/箱	/
40.105100-02RT	1000ul	聚丙烯 (PP)	适配LTS移液器吸头，盒装，灭菌	辐照灭菌	96个/盒.50盒/箱	/
40.105101-02RT	1000ul	聚丙烯 (PP)	适配LTS移液器吸头，盒装，灭菌，低吸附	辐照灭菌	96个/盒.50盒/箱	/
40.106100-02RT	1000ul	聚丙烯 (PP)	适配LTS移液器吸头，盒装，带滤芯，灭菌	辐照灭菌	96个/盒.50盒/箱	/
40.106101-02RT	1000ul	聚丙烯 (PP)	适配LTS移液器吸头，盒装，带滤芯，灭菌，低吸附	辐照灭菌	96个/盒.50盒/箱	/
40.105000-02RT	1000ul	聚丙烯 (PP)	适配LTS移液器吸头，袋装	辐照灭菌	1000支/袋，40袋/箱	/
40.105001-02RT	1000ul	聚丙烯 (PP)	适配LTS移液器吸头，袋装，低吸附	辐照灭菌	1000支/袋，40袋/箱	/
40.105102-02RT	1000ul	聚丙烯 (PP)	适配LTS移液器吸头，叠装，灭菌	辐照灭菌	96支/盒，10盒/叠，10叠/箱	/
40.105103-02RT	1000ul	聚丙烯 (PP)	适配LTS移液器吸头，叠装，灭菌，低吸附	辐照灭菌	96支/盒，10盒/叠，10叠/箱	/

自动化吸头及导电吸头 Automated conductive tip

产品特点

- 吸头分穴包装，导电性均一：每箱吸头同一穴号，确保了产品的可追溯性与导电性能均一性，提高了实验结果的准确性，大大减少了产品个体之间的偏差。
- 内表面光滑：独有的工艺技术，确保了吸头具有光滑的内表面，大大减少了液体残留量。
- 超强的疏水性：滤芯吸头多孔组织过滤，以确保最佳性能，且具有超强的疏水性，对气溶胶形成了一道坚固的屏障，消除了样品交叉污染的风险。
- 包装坚固：包装盒壁厚尺寸加大，抗撞击、抗跌落，保证了产品在恶劣运输条件下的完整性和安全性。
- 气密性好、适配性强：完美适配自动化液体工作站，确保液体工作站精准运行；按原厂适配器进行结构测绘，拥有成熟的注塑工艺，保证了产品具有良好的气密性和适配性，提高了产品在工作中的机械精度。
- 辐照灭菌：安全快速




产品编号	容量	适配机型	产品名称	颜色	包装规格	目录价
40.120010	50ul	tecan系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 无滤芯	透明	96支/盒，24盒/箱	/
40.120011	50ul	tecan系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 滤芯	透明	96支/盒，24盒/箱	/
40.120110	50ul	tecan系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 灭菌 / 无滤芯	透明	96支/盒，24盒/箱	/
40.120111	50ul	tecan系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 灭菌 / 滤芯	透明	96支/盒，24盒/箱	/
40.123010	50ul	Hamilton系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 无滤芯	透明	96支/盒，24盒/箱	/
40.123011	50ul	Hamilton系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 灭菌 / 无滤芯	透明	96支/盒，24盒/箱	/
40.123110	50ul	Hamilton系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 滤芯	透明	96支/盒，24盒/箱	/
40.123111	50ul	Hamilton系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 灭菌 / 滤芯	透明	96支/盒，24盒/箱	/
40.121010	200ul	tecan系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 无滤芯	透明	96支/盒，24盒/箱	/
40.121011	200ul	tecan系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 滤芯	透明	96支/盒，24盒/箱	/
40.121110	200ul	tecan系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 灭菌 / 无滤芯	透明	96支/盒，24盒/箱	/
40.121111	200ul	tecan系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 灭菌 / 滤芯	透明	96支/盒，24盒/箱	/
40.124010	300ul	Hamilton系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 无滤芯	透明	96支/盒，24盒/箱	/
40.124011	300ul	Hamilton系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 灭菌 / 无滤芯	透明	96支/盒，24盒/箱	/
40.124110	300ul	Hamilton系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 滤芯	透明	96支/盒，24盒/箱	/
40.124111	300ul	Hamilton系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 灭菌 / 滤芯	透明	96支/盒，24盒/箱	/
40.122010	1000ul	tecan系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 无滤芯	透明	96支/盒，24盒/箱	/
40.122011	1000ul	tecan系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 滤芯	透明	96支/盒，24盒/箱	/
40.122110	1000ul	tecan系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 灭菌 / 无滤芯	透明	96支/盒，24盒/箱	/
40.122111	1000ul	tecan系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 灭菌 / 滤芯	透明	96支/盒，24盒/箱	/
40.125010	1000ul	Hamilton系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 无滤芯	透明	96支/盒，24盒/箱	/
40.125011	1000ul	Hamilton系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 灭菌 / 无滤芯	透明	96支/盒，24盒/箱	/
40.125110	1000ul	Hamilton系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 滤芯	透明	96支/盒，24盒/箱	/
40.125111	1000ul	Hamilton系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 灭菌 / 滤芯	透明	96支/盒，24盒/箱	/
40.120020	50ul	tecan系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 无滤芯	黑色	96支/盒，24盒/箱	/
40.120021	50ul	tecan系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 滤芯	黑色	96支/盒，24盒/箱	/
40.120120	50ul	tecan系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 灭菌 / 无滤芯	黑色	96支/盒，24盒/箱	/
40.120121	50ul	tecan系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 灭菌 / 滤芯	黑色	96支/盒，24盒/箱	/
40.123020	50ul	Hamilton系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 无滤芯	黑色	96支/盒，24盒/箱	/
40.123021	50ul	Hamilton系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 滤芯	黑色	96支/盒，24盒/箱	/
40.123120	50ul	Hamilton系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 灭菌 / 无滤芯	黑色	96支/盒，24盒/箱	/
40.123121	50ul	Hamilton系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 灭菌 / 滤芯	黑色	96支/盒，24盒/箱	/
40.121020	200ul	tecan系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 无滤芯	黑色	96支/盒，24盒/箱	/
40.121021	200ul	tecan系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 滤芯	黑色	96支/盒，24盒/箱	/
40.121120	200ul	tecan系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 灭菌 / 无滤芯	黑色	96支/盒，24盒/箱	/
40.121121	200ul	tecan系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 灭菌 / 滤芯	黑色	96支/盒，24盒/箱	/
40.124020	300ul	Hamilton系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 无滤芯	黑色	96支/盒，24盒/箱	/
40.124021	300ul	Hamilton系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 滤芯	黑色	96支/盒，24盒/箱	/
40.124120	300ul	Hamilton系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 灭菌 / 无滤芯	黑色	96支/盒，24盒/箱	/
40.124121	300ul	Hamilton系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 灭菌 / 滤芯	黑色	96支/盒，24盒/箱	/
40.122020	1000ul	tecan系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 无滤芯	黑色	96支/盒，24盒/箱	/
40.122021	1000ul	tecan系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 滤芯	黑色	96支/盒，24盒/箱	/
40.122120	1000ul	tecan系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 灭菌 / 无滤芯	黑色	96支/盒，24盒/箱	/
40.122121	1000ul	tecan系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 灭菌 / 滤芯	黑色	96支/盒，24盒/箱	/
40.125020	1000ul	Hamilton系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 无滤芯	黑色	96支/盒，24盒/箱	/
40.125021	1000ul	Hamilton系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 滤芯	黑色	96支/盒，24盒/箱	/
40.125120	1000ul	Hamilton系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 灭菌 / 无滤芯	黑色	96支/盒，24盒/箱	/
40.125121	1000ul	Hamilton系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 灭菌 / 滤芯	黑色	96支/盒，24盒/箱	/

5ml/10ml 移液吸头 Pipette tip(5ml/10ml)

产品特点

使用最高级原料，产于10万级无尘车间，灭菌产品被认证为无DNA酶、RNA酶、热原、DNA、ATP。非灭菌产品是认证的无DNA酶、RNA酶、热原。

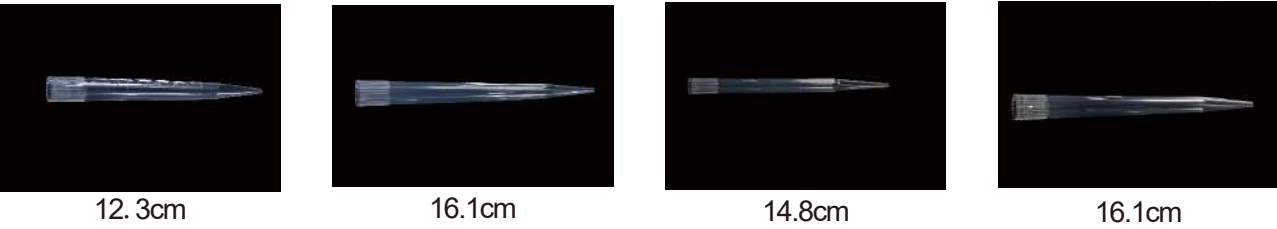

适配艾本德移液吸头

产品编号	容量	材质	产品名称	包装规格	目录价
40.126110	5ml	聚丙烯 (PP)	适配5mlEppendorf 移液枪，透明，灭菌，盒装	24支/盒，30盒/箱	/
40.126111	5ml	聚丙烯 (PP)	适配5mlEppendorf 移液枪，透明，低吸附、灭菌，盒装	24支/盒，30盒/箱	/
40.126112	5ml	聚丙烯 (PP)	适配5mlEppendorf 移液枪，透明，带滤芯、灭菌，盒装	24支/盒，30盒/箱	/
40.126113	5ml	聚丙烯 (PP)	适配5mlEppendorf 移液枪，透明，带滤芯、低吸附、灭菌，盒装	24支/盒，30盒/箱	/
40.126010	5ml	聚丙烯 (PP)	适配5mlEppendorf 移液枪，透明，袋装	100支/袋，20袋/箱	/
40.126011	5ml	聚丙烯 (PP)	适配5mlEppendorf 移液枪，透明，低吸附，袋装	100支/袋，20袋/箱	/
40.126012	5ml	聚丙烯 (PP)	适配5mlEppendorf 移液枪，透明，带滤芯，袋装	100支/袋，20袋/箱	/
40.126013	5ml	聚丙烯 (PP)	适配5mlEppendorf 移液枪，透明，带滤芯，低吸附，袋装	100支/袋，20袋/箱	/
40.127110	10ml	聚丙烯 (PP)	适配10mlEppendorf 移液枪，透明，灭菌，盒装	24支/盒，40盒/箱	/
40.127111	10ml	聚丙烯 (PP)	适配10mlEppendorf 移液枪，透明，低吸附，灭菌，盒装	24支/盒，40盒/箱	/
40.127112	10ml	聚丙烯 (PP)	适配10mlEppendorf 移液枪，透明，带滤芯，灭菌，盒装	24支/盒，40盒/箱	/
40.127113	10ml	聚丙烯 (PP)	适配10mlEppendorf 移液枪，透明，带滤芯，低吸附，灭菌，盒装	96个/盒.50盒/箱	/
40.127010	10ml	聚丙烯 (PP)	适配10mlEppendorf 移液枪，透明，袋装	100支/袋，10袋/箱	/
40.127011	10ml	聚丙烯 (PP)	适配10mlEppendorf 移液枪，透明，低吸附，袋装	100支/袋，10袋/箱	/
40.127012	10ml	聚丙烯 (PP)	适配10mlEppendorf 移液枪，透明，带滤芯，袋装	100支/袋，10袋/箱	/
40.127013	10ml	聚丙烯 (PP)	适配10mlEppendorf 移液枪，透明，带滤芯，低吸附，袋装	100支/袋，10袋/箱	/

适配赛默飞移液吸头

产品编号	容量	材质	产品名称	包装规格	目录价
40.126114	5ml	聚丙烯 (PP)	适配5mlThermo 移液枪，透明，灭菌，盒装	40支/盒，40盒/箱	/
40.126115	5ml	聚丙烯 (PP)	适配5mlThermo 移液枪，透明，低吸附、灭菌，盒装	40支/盒，40盒/箱	/
40.126116	5ml	聚丙烯 (PP)	适配5mlThermo 移液枪，透明，带滤芯、灭菌，盒装	40支/盒，40盒/箱	/
40.126117	5ml	聚丙烯 (PP)	适配5mlThermo 移液枪，透明，带滤芯、低吸附、灭菌，盒装	40支/盒，40盒/箱	/
40.126014	5ml	聚丙烯 (PP)	适配5mlThermo 移液枪，透明，袋装	100支/袋，20袋/箱	/
40.126015	5ml	聚丙烯 (PP)	适配5mlThermo 移液枪，透明，低吸附，袋装	100支/袋，20袋/箱	/
40.126016	5ml	聚丙烯 (PP)	适配5mlThermo 移液枪，透明，带滤芯，袋装	100支/袋，20袋/箱	/
40.126017	5ml	聚丙烯 (PP)	适配5mlThermo 移液枪，透明，带滤芯，低吸附，袋装	100支/袋，20袋/箱	/
40.127114	10ml	聚丙烯 (PP)	适配10mlThermo 移液枪，透明，灭菌，盒装	24支/盒，40盒/箱	/
40.127115	10ml	聚丙烯 (PP)	适配10mlThermo 移液枪，透明，低吸附，灭菌，盒装	24支/盒，40盒/箱	/
40.127116	10ml	聚丙烯 (PP)	适配10mlThermo 移液枪，透明，带滤芯，灭菌，盒装	24支/盒，40盒/箱	/
40.127117	10ml	聚丙烯 (PP)	适配10mlThermo 移液枪，透明，带滤芯，低吸附，灭菌，盒装	24支/盒，40盒/箱	/
40.127014	10ml	聚丙烯 (PP)	适配10mlThermo 移液枪，透明，袋装	100支/袋，10袋/箱	/
40.127015	10ml	聚丙烯 (PP)	适配10mlThermo 移液枪，透明，低吸附，袋装	100支/袋，10袋/箱	/
40.127016	10ml	聚丙烯 (PP)	适配10mlThermo 移液枪，透明，带滤芯，袋装	100支/袋，10袋/箱	/
40.127017	10ml	聚丙烯 (PP)	适配10mlThermo 移液枪，透明，带滤芯，低吸附，袋装	100支/袋，10袋/箱	/

用放心耗材 选鑫联诚润

CHAPTER 生物制药类耗材

- 储液瓶
- 手提桶
- 放水桶




储液瓶

产品介绍


- 瓶身PC材质、瓶盖PP材质
- 一次性注吹成型
- 规格有：2L、5L、10L、20L
- 建议温度范围为-100℃至100℃
- 适用于大容量的培养液和蒸馏水等液体的容器




产品编码	产品名称	规格	颜色	包装规格	单位	外箱尺寸mm
40.739101	储液瓶	2L	透明	12个/箱	箱	51*37.5*30cm
40.740101	储液瓶	5L	透明	6个/箱	箱	51*37.5*33.5cm
40.741101	储液瓶	10L	透明	2个/箱	箱	53*34.5*29cm
40.742101	储液瓶	20L	透明	3个/箱	箱	78*28*52.5cm

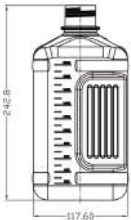


2L储液瓶

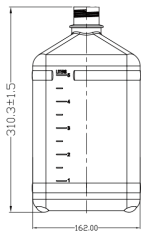

5L储液瓶

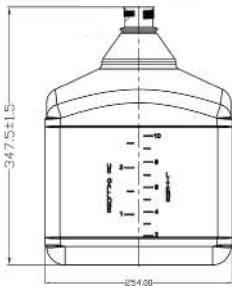

10L储液瓶

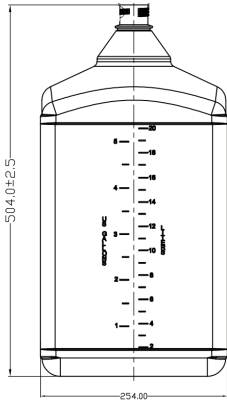

20L储液瓶

手提桶（可高温高压消毒）

产品介绍

- 可在真空状态（常温）下使用
- 耐温度：-40℃~121℃
- 可用于高压灭菌
- 带一体成型把手
- 材质：瓶体·瓶盖／PP（聚丙烯）、瓶盖密封部／TPE（热塑性弹性体）
- 适用于大容量的培养液和蒸馏水等其他容器高压灭菌的药品瓶



产品名称	规格	颜色	包装规格	单位	外箱尺寸mm
手提桶	4L	白色	22个/箱	箱	94.5*32.5*67.5cm
手提桶	10 L	白色	6个/箱	箱	78.5*53*39cm
手提桶	20L	白色	3个/箱	箱	73.5*43*56cm
手提桶	50L	白色	1个/箱	箱	85*55*28cm

放水桶（带龙头、带手柄）

产品介绍

- 壁厚（约 3MM±0.5MM）
- 强度·耐久性好
- 耐热温度：121℃
- 可高温高压灭菌（121℃·15 分钟以下）
- 带一体成型把手
- 是适用于大容量的培养液和蒸馏水等其他容器高压灭菌的药品瓶
- 材质：瓶体·瓶盖／PP（聚丙烯）、瓶盖密封部／TPE（热塑性弹性体）



产品编码	产品名称	规格	颜色	包装规格	单位	外箱尺寸mm
40.747001	放水桶(带龙头、带手柄)	10L	白色	8个/箱	箱	52*52*41cm
40.748001	放水桶(带龙头、带手柄)	20 L	白色	6个/箱	箱	60*60*56cm

8

CHAPTER

生物制药类耗材

• 一次性移液储液瓶



一次性移液储液瓶

产品介绍

瓶身由PETG材质制成,透明度高，机械强度高，耐低温，抗紫外线，利于观察与运输。

瓶盖由外盖和内盖组合而成，内盖有2孔通道和3孔通道可供选择。

容量选择为125ML\250ML\500ML\1000ML。

瓶体可耐受-80℃冻存24小时。

密封性能：产品密封后在负压90KPA下，保持180S不漏液。

无细胞毒性，无热源，内毒素≤0.25EU/ML。

产品经辐照灭菌，一次性使用，包装破损禁止使用



预期用途(作用原理)：2通款配1根C-FLEX管路（圣戈班），3通款配2根C-FLEX管路（圣戈班），配备赛多利斯空气过滤器。在配件管路中，C-FLEX管路用于液体的转移,可无菌焊接和热封。

移液效率

蠕动泵流速 (mL/min)	125	250	500	1000
用时 (s)	463.91	239.76	120.21	80.89



125ml (2通款)

250ml (2通款)

500ml (3通款)

1000ml (3通款)

转移盖



产品型号	描述	管路配置	包装规格
40.731101	一次性移液储液瓶 125mL 2通款	外侧管路1：焊接管，ID3/16寸OD5/16，60cm，焊密封，止流夹 外侧管路2：硅胶管，ID3/16寸OD5/16，8cm，过滤器 内伸管路：硅胶管，ID1/8寸OD1/4寸，13cm，触底	1个/盒、10盒/箱
40.732101	一次性移液储液瓶 125mL 3通款	外侧管路1：焊接管，ID3/16寸OD5/16，60cm，焊密封，止流夹 外侧管路2：硅胶管，ID3/16寸OD5/16，8cm，过滤器 外侧管路3：焊接管，ID3/16寸OD5/16，60cm，焊密封，止流夹 内伸管路1：硅胶管，ID1/8寸OD1/4寸，13cm，触底 内伸管路2：硅胶管，ID1/8寸OD1/4寸，13cm，触底	1个/盒、10盒/箱
40.733101	一次性移液储液瓶 250mL 2通款	外侧管路1：焊接管，ID3/16寸OD5/16，60cm，焊密封，止流夹 外侧管路2：硅胶管，ID3/16寸OD5/16，8cm，过滤器 内伸管路：硅胶管，ID1/8寸OD1/4寸，16cm，触底	1个/盒、10盒/箱
40.734101	一次性移液储液瓶 250mL 3通款	外侧管路1：焊接管，ID3/16寸OD5/16，60cm，焊密封，止流夹 外侧管路2：硅胶管，ID3/16寸OD5/16，8cm，过滤器 外侧管路3：焊接管，ID3/16寸OD5/16，60cm，焊密封，止流夹 内伸管路1：硅胶管，ID1/8寸OD1/4寸，16cm，触底 内伸管路2：硅胶管，ID1/8寸OD1/4寸，16cm，触底	1个/盒、10盒/箱
40.735101	一次性移液储液瓶 500mL 2通款	外侧管路1：焊接管，ID3/16寸OD5/16，60cm，焊密封，止流夹 外侧管路2：硅胶管，ID3/16寸OD5/16，8cm，过滤器 内伸管路：硅胶管，ID1/8寸OD1/4寸，20cm，触底	1个/盒、10盒/箱
40.736101	一次性移液储液瓶 500mL 3通款	外侧管路1：焊接管，ID3/16寸OD5/16，60cm，焊密封，止流夹 外侧管路2：硅胶管，ID3/16寸OD5/16，8cm，过滤器 外侧管路3：焊接管，ID3/16寸OD5/16，60cm，焊密封，止流夹 内伸管路1：硅胶管，ID1/8寸OD1/4寸，20cm，触底 内伸管路2：硅胶管，ID1/8寸OD1/4寸，20cm，触底	1个/盒、10盒/箱
40.737101	一次性移液储液瓶 1000mL 2通款	外侧管路1：焊接管，ID3/16寸OD5/16，60cm，焊密封，止流夹 外侧管路2：硅胶管，ID3/16寸OD5/16，8cm，过滤器 内伸管路：硅胶管，ID1/8寸OD1/4寸，24cm，触底	1个/盒、10盒/箱
40.738101	一次性移液储液瓶 1000mL 3通款	外侧管路1：焊接管，ID3/16寸OD5/16，60cm，焊密封，止流夹 外侧管路2：硅胶管，ID3/16寸OD5/16，8cm，过滤器 外侧管路3：焊接管，ID3/16寸OD5/16，60cm，焊密封，止流夹 内伸管路1：硅胶管，ID1/8寸OD1/4寸，24cm，触底 内伸管路2：硅胶管，ID1/8寸OD1/4寸，24cm，触底	1个/盒、10盒/箱